

# Phonak Virto™ B-Titanium

Information produit



Phonak Virto B-Titanium est un produit sur-mesure innovant proposant deux niveaux de performances pour les pertes auditives légères à sévères.

Fortes de la technologie de la nouvelle plateforme Phonak Belong™, les aides auditives Phonak Virto B-Titanium donnent la réponse idéale à tous les patients qui recherchent les meilleures performances auditives dans la solution intra-auriculaire sur-mesure la plus esthétique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)

# Description des produits




Phonak Virto B-Titanium  
B90/B70

<b>Niveau de puissance</b>	
M	•
P	•
SP	•
<b>Configuration / options / technologie</b>	
Taille de la pile	10
Bouton-poussoir (pour le régl. du volume ou le changement de prog.)	en option
EasyPhone (pour téléphone acoustique)	en option
MiniControl* (pour le réglage du volume ou le changement de prog.)	en option
Capteur-T	en option
Technologie de microphone	Omni
Indice de protection	IP68 <sup>1</sup>


\*uniquement disponible sans bouton-poussoir

## Données techniques


Niveau de puissance		M	P	SP
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	109	115	119
	Simulateur d'oreille	120	125	129
Gain maximum (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	40	50	60
	Simulateur d'oreille	50	60	70
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	<100 – 7000	<100 – 6700	<100 – 7000
Courant de fonctionnement (mA)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	0,95	1,00	0,95
Plage d'application				

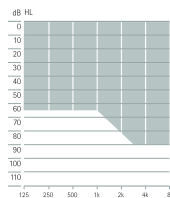

Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques

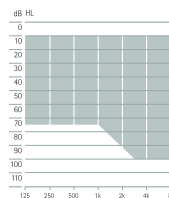

Pertes auditives légères à moyennement sévères, toutes configurations audiométriques

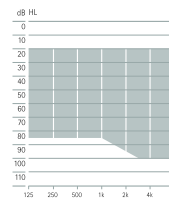

Pertes auditives moyennes à sévères, toutes configurations audiométriques.

## Couleurs

Styles de coque  
IIC / CIC

Couleur de coque

Gris Titane



Couleur de face-plate

Noir

<sup>1</sup> L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n'a été retrouvée à l'intérieur du boîtier.

# Appareillage

Logiciel	Phonak Target 5.1 ou supérieur
Interfaces	Câble de programmation, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

## Gamme de communication sans fil

	<b>Phonak Virto B-Titanium</b> B90/B70
Accessoire sans fil	
 Phonak MiniControl	En option

## Niveaux de performances

	Premium B90	Avancé B70	Fonctions	Premium B90	Avancé B70
<b>AutoSense OS</b>	Premium	Avancé	FlexControl	•	•
Situation calme	•	•	FlexVolume	•	•
Confort dans le bruit	•	•	SoundRecover 2	•	•
Parole dans le bruit	•	•	Correction de sonie	•	•
Musique	•	•	Canaux d'adaptation fine	20	16
Parole en voiture	•		LarsenBloc	•	•
Situation réverbérante	•		NoiseBloc	•	•
			EchoBloc	•	
<b>Programmes supplémentaires</b>			SoundRelax	•	•
Program. supplémentaires max.	5	5	AOV Et AOV-0	•	•
Situation réverbérante	•		Tinnitus Balance	•	•
Situation calme	•	•	auto Acclimatation	•	•
Confort dans le bruit	•	•			
Parole dans le bruit	•	•			
Musique	•	•			
Téléphone acoustique	•	•			
Programme personnalisé	•	•			

---

Life is on\*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

\*Et la vie s'exprime !



[www.audition.guide](http://www.audition.guide)

Tél : +213 5 42 75 58 43